



Universal Securement Device

REF	Description
3200S	Small Universal Securement
3300M	Medium Universal Securement
3400L	Large Universal Securement



STERILE R

LV05006 Rev 3

IMA

Independent Medical Associates

www.I-MA.com
info@I-MA.com
p: 888.548.4462
f: 888-548-1462



INSTRUCTIONS

English

1. Select the correct size Grip-Lok for your application.

REF	Size	Line/Tubing Diameter
3200S	Small	1.5 to 4.5 mm
3300M	Medium	3.0 to 8.0 mm
3400L	Large	6.0 to 13.0 mm

2. Select the area for the placement of the Grip-Lok. Note: The line or tube should be already inserted in the patient.
3. Prepare the skin according to the standard hospital protocol for dressing application. Hair removal may be required on some patients for better adhesion.
4. Open the top flap, remove the interior liner and hold the flap open.
5. Slide the Grip-Lok under so that the line or tube is in the center of the exposed adhesive.
6. Secure the top flap over the line or tube and apply gentle pressure to the center fabric area over the adhesive.
7. Hold the Grip-Lok in position while removing the paper backing from one side, then the other, to secure on the skin surface.

Direction: for added skin protection, use skin prep pad prior to application of stabilization device.

Note: replace securement device if soiled or saturated in fluid.

Note: use of an alcohol swab will ease removal of securement device from the skin



This product does not contain any natural rubber latex.



This product is indicated for single patient use.

GEBRAUCHSANLEITUNG

German

1. Für die jeweilige Anwendung die richtige Grip-Lok-Größe wählen.


REF	Größe	Schlauch/Sonden-Durchmesser
3200S	Klein	1.5 bis 4.5 mm
3300M	Mittel	3.0 bis 8.0 mm
3400L	Groß	6.0 bis 13.0 mm

2. Den Bereich auswählen, in dem der Grip-Lok angebracht werden soll. Hinweis: Der Schlauch oder die Sonde sollte bereits im Patienten eingeführt sein.
3. Die Haut entsprechend den Krankenhausstandardrichtlinien für Verbände vorbereiten. Bei einigen Patienten kann eine Haarentfernung für bessere Haftung notwendig sein.
4. Die obere Lasche öffnen, die innere Einlage entfernen und die Lasche geöffnet halten.
5. Den Grip-Lok unterschieben, so dass der Schlauch oder die Sonde sich in der Mitte des freiliegenden Klebestreifens befindet.
6. Die obere Lasche über den Schlauch oder die Sonde kleben und sanften Druck auf den mittleren Klettverschluss über dem Klebestreifen ausüben.
7. Den Grip-Lok in seiner Position festhalten und die Papierabdeckung erst von einer und dann der anderen Seite entfernen, um ihn an der Hautoberfläche festzukleben.

Anleitung: Für zusätzlichen Schutz der Haut vor der Applikation der Sicherungsvorrichtung einen Hautvorbereitungstupfer verwenden.

Hinweis: Die Sicherungsvorrichtung ersetzen, wenn sie verschmutzt oder mit Flüssigkeit getränkt ist.

Hinweis: Die Entfernung der Sicherungsvorrichtung von der Haut wird durch einen Alkoholtupfer erleichtert.

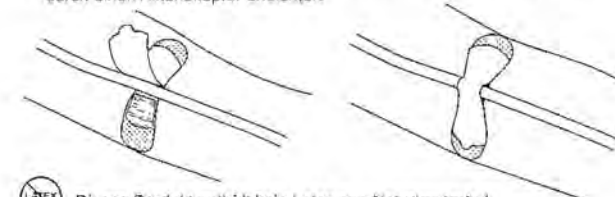

Dieses Produkt enthält kein Latex aus Naturkautschuk.



Dieses Produkt ist für den Gebrauch an nur einem Patienten bestimmt.

ISTRUZIONI

Italian

1. Selezionare il Grip-Lok delle dimensioni corrette per l'applicazione.

RIF	Dimensioni	Diametro linea/tubo
3200S	Small (piccola)	1,5 - 4,5mm
3300M	Medium (media)	3,0 - 8,0mm
3400L	Large (grande)	6,0 - 13,0mm

2. Selezionare l'area di posizionamento del Grip-Lok. Nota: la linea o il tubo devono essere già inseriti al paziente.
3. Preparare la cute seguendo il protocollo ospedaliero standard per l'applicazione delle medicazioni. In alcuni pazienti può rendersi necessaria la depilazione per una migliore adesione.
4. Aprire il lembo superiore, rimuovere il rivestimento interno e mantenere aperto il lembo.
5. Far scivolare il Grip-Lok nella parte sottostante, in modo che la linea o il tubo si trovino al centro dell'adesivo esposto.
6. Essare il lembo superiore sopra la linea o il tubo e applicare una delicata pressione al centro dell'area in tessuto sopra l'adesivo.
7. Mantenere il Grip-Lok in posizione durante la rimozione del rivestimento di

INSTRUCTIES

Dutch

1. Kies een Grip-Lok van de juiste maat voor uw toepassing.

REF	Maat	Diameter lijn/slang
3200S	Klein	1.5 tot 4.5mm
3300M	Medium	3.0 tot 8.0mm
3400L	Groot	6.0 tot 13.0mm

2. Kies een regio voor plaatsing van de Grip-Lok. Opmerking: de lijn of sonde moet al in het lichaam van de patiënt zijn ingebracht.
3. Preparere de huid volgens het standaard klinisch protocol voor het aanbrengen van verbandmiddelen. Bij sommige patiënten kan ontharing noodzakelijk zijn om de adhesie te verbeteren.
4. Open het bovenste lipje, verwijder de binnenste dekstrip en houd het lipje geopend.
5. Schuif de Grip-Lok onder de lijn of sonde, zodanig dat de lijn of sonde in het midden van het blootgelegde kleefvlak ligt.
6. Plak het bovenste lipje over de lijn/sonde en oefen lichte druk uit op het middelste stuk klittenband op het kleefvlak.
7. Houd de Grip-Lok in positie terwijl u het papieren deklaagje eerst van