

CODE ^{kit}	DIAMETER	LENGTH	BOX	CODE ^{kit}	DIAMETER	LENGTH	BOX
PRE1310*	13G	100 mm	5	PRE1807	18G	70 mm	5
PRE1407	14G	70 mm	5	PRE1810	18G	100 mm	5
PRE1410	14G	100 mm	5	PRE1815	18G	150 mm	5
PRE1415	14G	150 mm	5	PRE1820	18G	200 mm	5
PRE1420	14G	200 mm	5	PRE1825	18G	250 mm	5
PRE1610	16G	100 mm	5	PRE1920	19G	200 mm	5
PRE1615	16G	150 mm	5	PRE2010	20G	100 mm	5
PRE1620	16G	200 mm	5	PRE2015	20G	150 mm	5
PRE1625	16G	250 mm	5	PRE2020	20G	200 mm	5

* non completo di mandrino a punta piramidale / Stylet not included

^{kit}codice articolo più K-00 per i Precisa Kit con Lidocaina
^{kit}codice articolo più K-01 per i Precisa Kit senza Lidocaina



Distributed By:

IMA

Independent Medical Associates

11733 66th St N Suite 113
 Largo, FL 334773
 888.548.4462
 FAX: 888.548.1462
 email: info@I-MA.com
 website: www.I-MA.com



PRECISA[®]

DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO PER
 BIOPSIA A GHIGLIOTTINA CON
 IMPUGNATURA AD ANELLI

SEMI-AUTOMATIC TRU-CUT
 BIOPSY DEVICE WITH
 TWO RING GRIP



DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO PER BIOPSIA A GHIGLIOTTINA CON IMPUGNATURA AD ANELLI

SEMI-AUTOMATIC TRU-CUT BIOPSY DEVICE WITH TWO RING GRIP

Il **PRECISA** è un dispositivo semiautomatico per biopsia dei tessuti molli.

Caratteristiche dell'ago:

- Cannula esterna sganciabile per prelievi multipli.
- Mandrino separato per il posizionamento sotto TAC.
- Fermo di sicurezza che consente di evitare avanzamenti indesiderati della cannula, di dividere i movimenti e di controllare l'avanzamento indipendentemente dalla velocità impressa.
- Supporto per stereotassi per portare l'ago a battuta sulla guida, consentendo anche in stereotassi biopsie multiple e l'utilizzo del fermo di sicurezza.
- Marker ecogeno.
- Centimetratura.
- Scelta della dimensione del campione (1 o 2 cm).

Accessori PRECISA KIT:

Telo per campo sterile 60x60cm (2) • Provetta con formalina 10% 10ML • Agitatore • Garze 7.5x7.5cm (10) • Cerotto • Mini bisturi • Tamponi di garza (3) • Pinzetta • Siringa da 10ml con aghi ipodermici 19Gx38mm (pre-filtrato) e 21Gx38mm • Lidocaina 2% 10ml • Ghiaccio istantaneo

PRECISA is a semi-automatic soft tissue biopsy needle.

Needle Features:


- Removable external cannula to perform multiple biopsies.
- Extra stylet for CT-guided biopsy.
- Safety block to avoid accidental cannula advancements.
- Stereotaxis spacer.
- Echogenic marker.
- Depth marks.
- Selectability of sample dimension (1 or 2 cm).

PRECISA KIT Accessories:


Drape 60x60 cm (2) • Formaline 10% 10 ml • Stirring rod • Gauzes 7.5x7.5 cm (10) • Adhesive bandage • Scalpel • Gauze sponges (3) • Forceps • 10 ml syringe with hypodermic needle 19Gx38 mm (pre-filtered) and 21Gx38mm • Lidocaine 2% 10 ml • Instant ice



FERMO DI SICUREZZA
SAFETY BLOCK

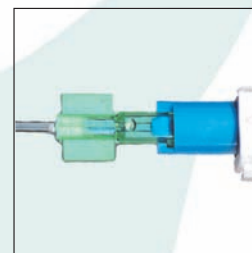

CANNULA ESTERNA RIMOVIBILE
REMOVABLE CANNULA

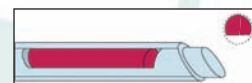

CULLA A GHIGLIOTTINA
TRU-CUT Type

